

# Budúcnosť kontroly oklúzie



**OccluSense<sup>®</sup>**  
by Bausch

# OccluSense®

OccluSense® predstavuje bezdrôtové zariadenie, ktoré využíva lokálnu bezdrôtovú sieť na prenos zaznamenaných údajov do aplikácie OccluSense®-iPad.

Nabíjačka zabezpečuje bezdrôtový prenos energie. Plne nabité batérie umožňujú až 4 hodiny prevádzky.



Obsah balenia OccluSense® Setu:  
Zariadenie OccluSense®, nabíjačka, 1 balenie s 25ks OccluSense® Senzorov BK 5025, OccluSense® Testsensor  
3ks nabíjateľných batérií AAA, skrutkovač IP6 Torx a manuál.  
OccluSense® Set v modrom kufriku [REF BK 5000](#)



# OccluSense® elektronický senzor tlaku:

- 60 mikrónový
- flexibilný
- farbený



Technologicky vyspelé OccluSense®  
snímače tlaku umožňujú  
zaznamenávanie žuvacích síl na  
256 úrovniach tlaku.

Tenký a flexibilný materiál  
umožňuje záznam statickej i  
dynamickej oklúzie.


Okrem toho, červené zafarbenie  
označuje oklúzálné kontakty na  
zuboch pacienta.

Súčasťou obsahu OccluSense®  
setu je aj jedno balenie  
s 25 senzormi (BK 5025).

OccluSense® Sensory 25 kusov REF BK 5025  
OccluSense® Sensory XL 25 kusov REF BK 5035 (k dispozícii v r.2019)

## Použitie ako artikulačný papier. Zaznamenávanie okluzálneho tlaku.

Používajte OccluSense® rovnako ako tradičné okluzálne materiály. Tlak statickej i dynamickej oklúzie môže byť zaznamenaný a následne uložený do aplikácie OccluSense®-iPad-App.

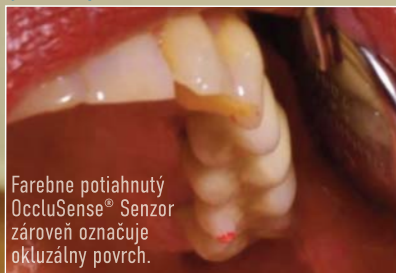

Farebne potiahnutý  
OccluSense® Senzor  
zároveň označuje  
okluzálny povrch.



# Aplikácia OccluSense® -iPad.

Zaznamenať, vyhodnotiť, organizovať, porovnať a exportovať okluzálne záznamy.



Aplikáciu OccluSense® -iPad je možné si bezplatne stiahnuť z Apple AppStore ([www.occlusense.com/install](http://www.occlusense.com/install)).

Podporované iPad modely: 12,9 "iPad Pro, 10,5" iPad Pro, 9,7 "iPad Pro, iPad Air 1, iPad Air 2.



Supported by:



on the basis of a decision  
by the German Bundestag



# www.occlusense.com

## Bausch<sup>®</sup>

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Straße 4 • D-50769 Köln - Germany • Tel: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • [info@bauschdental.de](mailto:info@bauschdental.de)

Bausch Articulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4 • Nashua, NH 03062, U.S.A. • Tel: +1-603-883-2155 • Tel: 888-6-BAUSCH • Fax: +1-603-883-0606 • [info@bauschdental.com](mailto:info@bauschdental.com)

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia • Tel: +61-2-9345-1945 • Fax: +61-2-9345-1955 • [info@bauschdental.com.au](mailto:info@bauschdental.com.au)

Bausch Articulating Papers Japan K. K. • 2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi • Osaka 563-0025, Japan • Tel: +81 72-737-9501 • Fax: +81 72-737-9502 • [info@bauschdental.jp](mailto:info@bauschdental.jp)

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. • Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 • 13304-240 Itu-SP, Brasil • Tel: +55 11 3020-9263 • [vendas@bauschbrasil.com.br](mailto:vendas@bauschbrasil.com.br)

Bausch and OccluSense® are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in the EU and other countries. Apple, iPad, iPad Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.