

KOFFERDAMOVÝ KATALÓG

www.dentonetsro.sk



KOFFERDAM


KOFFERDAM: Predstavuje spoľahlivý a jednoduchý nástroj pre zabezpečenie suchého pracovného poľa a aseptického ošetrenia jednotlivých zubov, čo je potrebné pri väčšine bežných zákrokov.

VÝHODY KOFFERDAMU:

- Suché a prehľadné pracovné pole
- Ochrana pacienta pred aspiráciou nástroja, cudzieho telesa
- Bariéra znižuje riziko prenosu infekcie pre personál
- Možnosť dezinfekcie pracovného poľa
- Nerušená práca - odbúranie rušivých vplyvov - jazyk, slina, líce
- Retrakcia mäkkých tkanív

ZÁKLADNÉ INŠTRUMENTY:

- 1. Kofferdamová blana** = blana z prírodného latexu, dostupná v rôznych veľkostiach a hrúbkach. Nelatexové kofferdamové blany sú používané u pacientov, ktorí majú alergiu na latex.
- 2. Spony** = spony rôznych veľkostí a tvarov, umožňujú retenciu aj v náročných prípadoch.
- 3. Dierovacie kliešte** = dierovač je určený na vyrezanie otvoru na zub do kofferdamovej blany. K dispozícii je 5 veľkostí dier s priemerom od 0,9 do 2,5 mm.
- 4. Sponové kliešte** = kliešte na upevňovanie a odstraňovanie spony.
- 5. Kofferdamový rámček** = kovový alebo plastový napínací rámček, slúži k napnutiu blany okolo úst pacienta.
- 6. Kofferdamové obrúsky** = sú používané na ochranu pacienta pred rôznymi alergickými reakciami.
- 7. Šablóna** = šablóna pre zakreslenie dier vo fólii pred perforáciou (dierkovaním).
- 8. Kofferdamový lubrikant** = umožňuje jednoduchšiu aplikáciu.

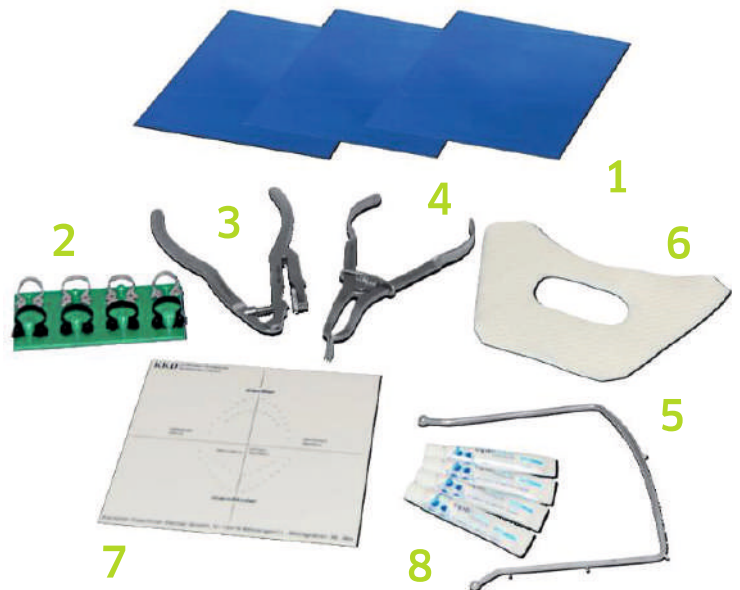

PRÍSLUŠENSTVO:

- Lopatka obojstranná** = pre lepšie vytlačenie kofferdamu od spony.
Pinzeta = pre lepšiu manipuláciu s kofferdamom.
Nožnice = špeciálne nožnice na strihanie kofferdamu.
Wedjets = stabilizačné vlákno, alternatíva ku klasickému upínaniu blany sponami.
Klinky = ligatúra (podviazanie) zubov.
Zubná niť = pre overenie priechodnosti interdentálnych priestorov. Ligatúra pomocou dentálnej nite je vhodná k fixácii kofferdamu na určitý zub, ktorá je uviazaná chirurgickým uzlom.
Matrice FLEXI - TRIX = špeciálne tvarované matrice pre kompozitné výplne druhej triedy.
Organizér na inštrumenty = zabraňuje zmiešaniu drobného príslušenstva.

VÝROBCOVIA A DODÁVATELIA:

Produkty od svetovej špičky aj na Slovensku.



„NOVA“ Kofferdamový set obsahuje (s kufríkom):

- 1 balenie kofferdamových latexových blán MDC® (medium), 36 ks
- dierovacie kliešte
- sponové kliešte
- kovový rámček
- nožnice na kofferdam
- 7 ks spôn (č. 00, 02, 7, 8, 8A, 9, 14A) + šablóna (zadarmo).

Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

Obsah kurfíka:



NOVA
DENTAL


210 €

Obj.kód: N2056-RDK

„KKD“ Kofferdamový set obsahuje:

- Kofferdam KKD® 36 ks (modrý/medium)
- Kovový rámček
- Sponové kliešte
- Dierovacie kliešte
- Šablóna
- Kofferdamové obrúsky
- Lubrikant (4 x 5 g)
- Spony triColor Antireflect (č. 00, 2, 2A, 1A, 7, 12A, 13A, 14A)
- Stojanček VARİbord 1 (na 8 spôn)

Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

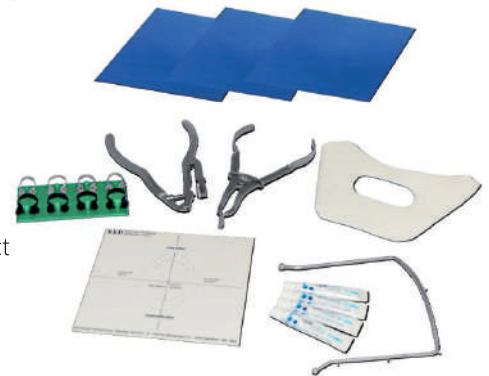

**KENTZLER
KASCHNER
DENTAL**

390 €

Obj.kód: 055945

„HAGER & WERKEN“ Kofferdamové sety:

Fit Rubberdam Starter Kit I

Set obsahuje:

Stojan s 12 sponami (veľkosť: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A)

- Sponové kliešte
- Dierovacie kliešte
- Kovový rámček (large)
- Rubber Dam brožúra

Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.



**HAGER
WERKEN**

285 €

Obj.kód: 355 320

Fit Rubberdam Starter Kit II

Set obsahuje:

Stojan s 12 sponami: (Veľkosť: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A).

- Sponové kliešte.
- Dierovacie kliešte.
- Kofferdam Fit Latex 36 ks (Médium).
- Plastový rámček.
- Šablóna.
- Rubber Dam brožúra.



305 €

Obj.kód: 355 338

Kofferdamové blany MDC

Dodávané so setom NOVA Instruments alebo je možné ich objednať samostatne.

Kofferdamové blany MDC /latexové/
Vyrobené z jemného prírodného latexu.
Rozmer blany: 15 x 15 cm.
Dostupné v 3 hrúbkach:
* tenké (thin)
* štandard (médium)
* hrubé (heavy).
Balenie obsahuje 36 ks. Farba: modrá.



15 €

Obj.kód: THIN / MEDIUM / HAEVY

Kofferdamové blany MDC /syntetické/
Bez obsahu latexu, vhodné pre alergikov.
Rozmer blany: 15 x 15 cm.
Dostupné vo veľkosti: * štandard (médium).
Balenie obsahuje 15 ks.
Farba: fialová.



18 €



Obj.kód: KOFF-SYNT

Kofferdamové blany „KKD“

Kofferdamové blany KKD /latexové/
Blany z prírodného latexu, odolné voči roztrhnutiu.
Rozmer blany: 15 x 15 cm.
Dostupné v 4 hrúbkach: * tenké (thin), 0,13 mm (± 0,02)
* stredné (médium), 0,20 mm (± 0,02)
* hrubé (heavy), 0,25 mm (± 0,02)
* extra hrubé (x-heavy), 0,31 mm (± 0,02).
Balenie: * štandard - 36 ks, možnosť zakúpenia balenia: * zvýhodnené - 2x 36 ks.
Farba: ružová, svetlomodrá, fialová, modrá, žltá, zelená, čierna.



mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07105
Zvýhodnené Obj. kód: 09014
schwer/ heavy
Standard Obj. kód: 07106
Zvýhodnené Obj. kód: 09015

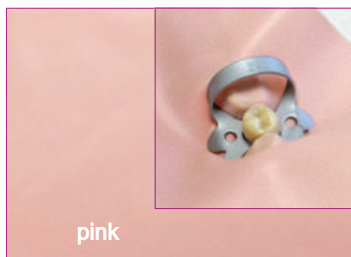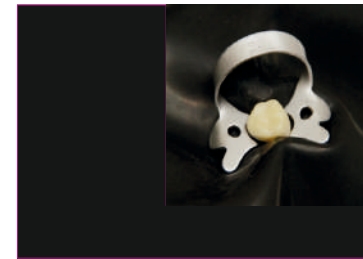

pink

mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07109
Zvýhodnené Obj. kód: 09012




blue

mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07125
Zvýhodnené Obj. kód: 09005

schwer/ heavy
Standard Obj. kód: 07126
Zvýhodnené Obj. kód: 09006


x-schwer/ x-heavy
Standard Obj. kód: 07127
Zvýhodnené Obj. kód: 09007

Predajná cena (36ks balenie) **19 €**
Predajná cena (zvýhodnené balenie 2x36 ks) **35 €**

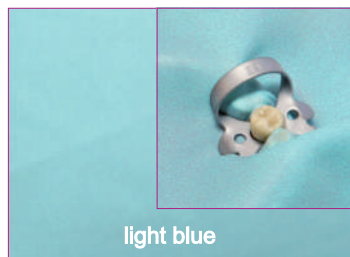

light blue

mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07113
Zvýhodnené Obj. kód: 09011

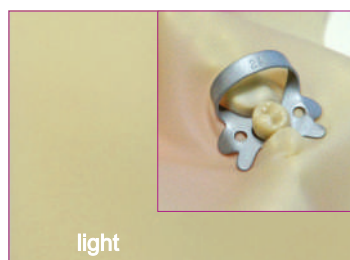


light

dünn/ thin
Standard Obj. kód: 07130
Zvýhodnené Obj. kód: 09004

mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07132
Zvýhodnené Obj. kód: 09009


schwer/ heavy
Standard Obj. kód: 07135
Zvýhodnené Obj. kód: 09008

x-schwer/ x-heavy
Standard Obj. kód: 07128
Zvýhodnené Obj. kód: 09010

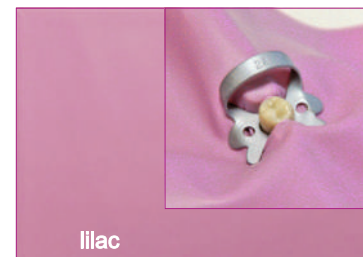

lilac

mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07117
Zvýhodnené Obj. kód: 09013

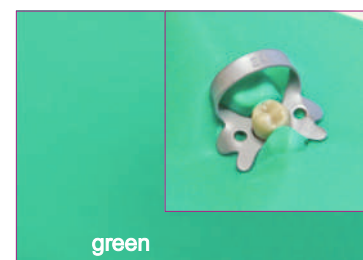

green

dünn/ thin
Standard Obj. kód: 07120
Zvýhodnené Obj. kód: 09000

mittel/ medium
Standard Obj. kód: 07121
Zvýhodnené Obj. kód: 09001

schwer/ heavy
Standard Obj. kód: 07122
Zvýhodnené Obj. kód: 09002

x-schwer/ x-heavy
Standard Obj. kód: 07123
Zvýhodnené Obj. kód: 09003

Kofferdamové blany KKD /nelatexové/
Vyrobené z pružného materiálu a odolného voči roztrhnutiu.

Alternatíva pre pacientov alergických na latex.
Rozmer blany: 15 x 15 cm.
Dostupné vo veľkosti:
* stredné (médium).

Balenie obsahuje 30 ks.
Farba: modrá.



34 €

Obj.kód: 07057

Kofferdamové blany „Hager & Werken“

Latexové kofferdamové blany sú hladké a jemne púdrované.
Rozmer blany: 15 x 15 cm.
Dostupné vo veľkosti:
* stredné (médium),
0,18 - 0,23 mm
* hrubé (heavy),
0,23 - 0,29 mm.

Balenie obsahuje: 36 ks.
Farba: zelená.



Predajná cena pre 36ks balenie:

20 €

Obj.kód: **Fit Latex Medium: 355 335**

Obj.kód: **Fit Latex Heavy: 355 336**

Kofferdamové blany „ZIRC Color Code“

INSTI DAM POSTERIOR /NON-latex/
Určený a prispôsobený na prácu v distálnom úseku.
Kompaktný dizajn pre pohodlnú prácu a komfort pacienta.
Umožňuje robiť RTG snímky bez skladania rámčeka.
Jednorazové použitie.
Preddierovaný (šetrí čas).
Balenie obsahuje 20 ks.
Farba: fialová.



Predajná cena pre 36ks balenie:

78 €



Obj.kód: 50Z457

INSTI DAM ANTERIOR /NON-latex/

Jednoduché použitie, jednoduché pozicionovanie. Flexibilný rám, elastický netrhajúci sa materiál. Umožňuje robiť TRG snímky bez skladania rámčeka.
Priemer cca 10,7 cm kompaktný dizajn.

Jednorazové použitie. Preddierovaný (šetrí čas).
Balenie obsahuje 20 ks.
Farba: modrá.



Predajná cena pre 36ks balenie:

66 €



Obj.kód: 50Z459

NOVINKY

OPTRAGATE /sterilný/

Bezlatexový ústny retractor s 3-dimenziálnou stabilitou a flexibilitou. Výborný prehľad pracovného poľa, komfortný pre pacienta.
Balenie obsahuje 80 ks.
Dostupné v 3 veľkostiach: Regular, Small, Junior.



125 €

Obj.kód: **Regular: 590850**

Obj.kód: **Small: 590851**

Obj.kód: **Junior: 591451**

OPTRADAM /sterilný/

Nový typ koferfamu bez spôn. Jednoduché nasadenie, pohodlný pre pacienta. Väčšie a prehľadnejšie pracovné pole.

Balenie obsahuje 50 ks.
Dostupné v 2 veľkostiach: Small a Regular.




89 €

Obj.kód: **Small: 627399**

Obj.kód: **Regular: 627400**

Prehľad KOFFERDAMOVÝCH SPŔN

POPIS spŔn:

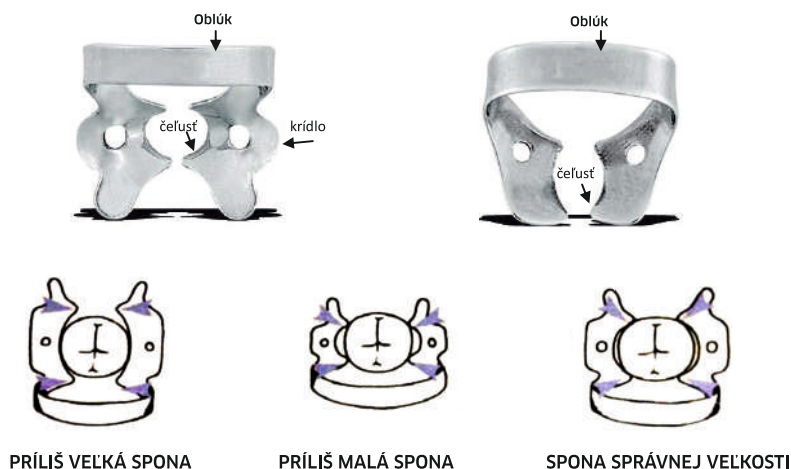

VÝBER spony:

Spona musí mať 4-bodový kontakt s proximálnymi stenami zuba. Ak je spona príliš veľká naráža na gingivu. Ak je spona príliš malá, neobopína dostatočne zub a je nestabilná.

SPONOVÉ SETY



Set spŔn KKD „Standard“

Základný set pre začiatočníkov.



Set obsahuje 8 spŔn:
premoláre - č. 0, 2, 2A, 1A
moláre - č. 7, 12A, 13A, 14A

110 €

Obj.kód: **52199S**

Set spŔn KKD „triColor Antireflect“

Špeciálny set pre užívateľov Cerec, mikroskopov a lúp.



Set obsahuje 8 spŔn:
premoláre - č. 0, 2, 2A, 1A
moláre - č. 7, 12A, 13A, 14A

153 €

Obj.kód: **02199S**

PODĽOŽKY NA SPONY:

Úložný priestor na spony. • Nový dizajn eliminuje riziko deformácie spŔn. • Sterilizovateľné aj so sponami až do 140°C.

VARİbord Typ 1

Na 8 spŔn.
 Rozmery: 110 x 55 mm.



28 €

Obj.kód: **05501**

VARİbord Typ 2

Na 12 spŔn.
 Rozmery: 110 x 85 mm.




32 €

Obj.kód: **05502**

VARİbord Typ 3

Na 20 spŔn.
 Rozmery: 140 x 110 mm.

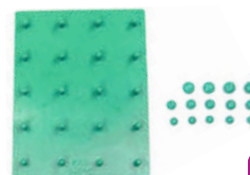

55 €

Obj.kód: **05503**

SPONY STANDARD

KRÍDLOVÉ SPONY
PREMOLÁRE

0 Zuby s úzkym krčkom



14 €

Obj.kód: 52210

1 Štandardná spona pre horné premoláre



14 €

Obj.kód: 52211

1A Malé premoláre s úzkym krčkom a redukovanou korunkou



14 €

Obj.kód: 52212

2 Štandardná spona pre dolné premoláre



14 €

Obj.kód: 52213

2A Spona pre premoláre s hrubým krčkom



14 €

Obj.kód: 52214



0



13 €

Obj.kód: NO581

2



13 €

Obj.kód: NO583

NOVA[★]

00



14 €

Obj.kód: 355341

0



14 €

Obj.kód: 355340

209



14 €

Obj.kód: 355383

208



14 €

Obj.kód: 355382

HÄGER
WERKEN

206



14 €

Obj.kód: 355380

207



14 €

Obj.kód: 355381

2



14 €

Obj.kód: 355343

2A



14 €

Obj.kód: 355344

SPONY STANDARD

KRÍDLOVÉ SPONY MOLÁRE



3 Pre malé
dolné
moláre



14 €

Obj.kód: 52230

7 Štandardná
spona pre
dolné moláre



14 €

Obj.kód: 52231

8 Štandardná
spona pre
horné moláre



14 €

Obj.kód: 52232

8A* Koreňová
spona pre
horné a
dolné moláre



14 €

Obj.kód: 52233

14 Pre čiastočne
prerezané
veľké, naklonené
moláre



14 €

Obj.kód: 52236

14A Pre čiastočne
prerezané,
veľké, guľaté,
naklonené
moláre



14 €

Obj.kód: 52237

7



13 €

Obj.kód: NO585

8



13 €

Obj.kód: NO587

8A



13 €

Obj.kód: NO589

14A



13 €

Obj.kód: NO593

NOVA*

200



14 €

Obj.kód: 355374

201



14 €

Obj.kód: 355375

202



14 €

Obj.kód: 355376

205



14 €

Obj.kód: 355379

**HÄGER
WERKEN**

5



14 €

Obj.kód: 355349

56



14 €

Obj.kód: 355370

7



14 €

Obj.kód: 355350

203



14 €

Obj.kód: 355377

SPONY STANDARD

KRÍDLOVÉ SPONY
ŠPECIÁLNE SPONY

S JEMNÝM OZUBENÍM PRE LEPŠIU PRILNAVOSŤ NA ZUBE

12A Pre moláre
v 2. a 4.
kvadrante

13A Pre moláre
v 1. a 3.
kvadrante



1T



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 52251

2T



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 52253

2AT



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 52254



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 52234



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 52235

1T



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 355752

1AT



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 355753

2T



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 355750

2AT



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 355751



9T



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 355754

14T



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 355758

56T



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 355759

FRONTÁLNE ZUBY

9 Pre labiálne kazy



14 €

Obj.kód: 52209

212 Pre labiálne kazy



14 €

Obj.kód: 52202

9



13 €

Obj.kód: N0591



SPONY STANDARD

BEZKRÍDLOVÉ SPONY



W1 Štandardná spona pre horné premoláre



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 52219

W2 Štandardná spona pre dolné premoláre



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 52220

W29 Univerzálna spona pre horné premoláre



PREMOLÁR

14 €

Obj.kód: 52225

W26 Univerzálna spona pre horné moláre



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 52255

W7 Univerzálna spona pre dolné moláre



MOLÁR

14 €

Obj.kód: 52250

PREMOLÁRE



W2A



14 €

Obj.kód: 355345

22



14 €

Obj.kód: 355360

27



14 €

Obj.kód: 355364

29



14 €

Obj.kód: 355366

MOLÁRE

15



14 €

Obj.kód: 355358

18



14 €

Obj.kód: 355359

26



14 €

Obj.kód: 355363

28



14 €

Obj.kód: 355365

24



14 €

Obj.kód: 355361

25



14 €

Obj.kód: 355362

30



14 €

Obj.kód: 355367

31



14 €

Obj.kód: 355368

SPONY triColor Antireflect

Vysokokvalitné špeciálne spony s antireflexným povrchom v 3 farbách:

● Matná zlatá ● Platinová ● Čierna

Vhodné pre užívateľov CEREC, mikroskopov a lupových okuliarov.

FRONTÁLNE ZUBY

212 Pre labiálne kazy



20 €

Obj.kód: 02202

KRÍDLOVÉ SPONY

PREMOLÁRE



0 Zuby s úzkym krčkom



20 €

Obj.kód: 02210

1 Štandardná spona pre horné premoláre



20 €

Obj.kód: 02211

1A Malé premoláre s úzkym krčkom a redukovanou korunkou



20 €

Obj.kód: 02212

2 Štandardná spona pre dolné premoláre



20 €

Obj.kód: 02213

2A Spona pre premoláre s hrubým krčkom



20 €

Obj.kód: 02214

KRÍDLOVÉ SPONY

MOLÁRE

3 Pre malé, dolné moláre



20 €

Obj.kód: 02230

7 Štandardná spona pre dolné moláre



20 €

Obj.kód: 02231

8 Štandardná spona pre horné moláre



20 €

Obj.kód: 02232

8A* Koreňová spona pre horné a dolné moláre



20 €

Obj.kód: 02233

KRÍDLOVÉ SPONY

MOLÁRE

12A Pre moláre v 2. a 4. kvadrante



20 €

Obj.kód: 02234

13A Pre moláre v 1. a 3. kvadrante



20 €

Obj.kód: 02235

14* Pre čiastočne prerezané, veľké, naklonené moláre



20 €

Obj.kód: 02236

14A* Pre čiastočne prerezané, veľké, guľaté, naklonené moláre



20 €

Obj.kód: 02237

* pre malé moláre a moláre s redukovanou korunkou

BEZKRÍDLOVÉ SPONY

W2 Štandardná spona pre dolné premoláre



PREMOLÁRE

20 €

Obj.kód: 02220

W29 Univerzálna spona pre horné premoláre



PREMOLÁRE

20 €

Obj.kód: 02225

W26 Univerzálna spona pre horné moláre



MOLÁRE

20 €

Obj.kód: 02255

W7 Štandardná spona pre dolné moláre



MOLÁRE

20 €

Obj.kód: 02250

ŠPECIÁLNE SPONY

HALLEROVA SPONA /set/

Retrakcia jazyka, ďasna a tváre.
Fixuje vatové valčeky.
Udržiava suché operačné pole.
Vhodná pre adhezívne techniky.
Uľahčuje optické odtlačky pri Cerec.
Možná práca bez asistencie.

Set obsahuje:

Stojan VARIBord Typ 1
Hallerove spony: 2A, 2AO, 2A UR, 2A UL
Bonus: gumičky.



390 €

Obj.kód: 52200

DIEROVACIE KLIESTE

- Vynikajúci mechanizmus, ktorý garantuje dokonalé ostro-rezné dierovanie kofferdamu.
- Rozpätie rôznych veľkostí otvorov – poskytuje presné dierovanie od najmenšieho predného zuba až po najväčšie stoličky.
- Špičkové nástroje z nerezovej ocele.

DIEROVACIE KLIESTE KKD



Typ Ivory (KKD)



108 €

Obj.kód: 05707

Typ Ainsworth (KKD)



99 €

Obj.kód: 05706

DIEROVACIE KLIESTE NOVA

Typ Ivory (NOVA)



50 €

Obj.kód: N0573

Typ Ainsworth (NOVA)



50 €

Obj.kód: N0571

NOVA⁺

DIEROVACIE KLIESTE HAGER WERKEN

Typ Fit Punch (Hager Werken)



91 €

Obj.kód: 355 321

SPONOVÉ KLIÈŠTE

- Zabezpečujú správne uchopenie každej spony bez toho, aby došlo k jej nesprávnej rotácii.
- Umožňujú jednoduchšie rozopnutie a nasadenie spony ako aj jej ľahké odstránenie po skončení úkonu.
- Vyrobené z nerezovej ocele.

SPONOVÉ KLIÈŠTE KKD

S matným povrchom (KKD)



58 €

Obj.kód: 05708

Čierne / Antireflexné
-vhodné najmä pre
užívateľov CEREC,
mikroskopov
a lúp (KKD)



130 €

Obj.kód: 02201

SPONOVÉ KLIÈŠTE NOVA

Typ Brewer (NOVA)



50 €

Obj.kód: N0575

Sponové kliešte (NOVA)

NOVA*




50 €

Obj.kód: N0577

SPONOVÉ KLIÈŠTE NOVA

Typ Stokes (NOVA)

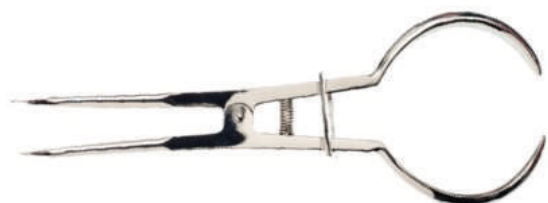

50 €

Obj.kód: N0576

Typ Washington (NOVA)



50 €

Obj.kód: N0578

SPONOVÉ KLIÈŠTE Hager Werken

Typ Clamp Forceps (Hager Werken)



39 €

Obj.kód: 355333




**HÄGER
WERKEN**

KOFFERDAMOVÉ RÁMČEKY

- Umožňujú rýchlu a jednoduchú fixáciu koffedamu pomocou vhodne umiestnených trňov na rámčeku.
- Nerušia počas zákroku.

KOFFERDAMOVÉ RÁMČEKY


Kovový rámček (veľký) – typ Young

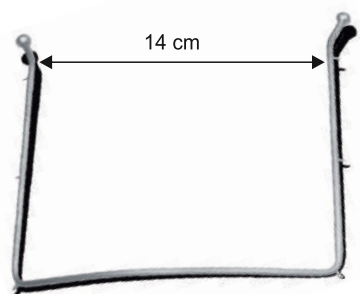

35 €

Obj.kód: 05818

Kovový rámček (malý) – typ Young

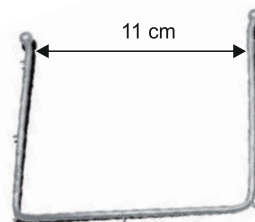

30 €

Obj.kód: 05819



Plastový rámček – typ Young



39 €

Obj.kód: 07048

Plastový rámček – typ Nygard-Ostby




21 €

Obj.kód: 07049

KOFFERDAMOVÉ RÁMČEKY


Malý (NOVA)

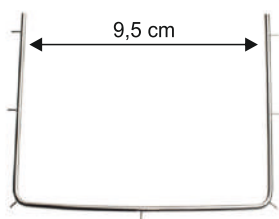

20 €

Obj.kód: N0579

Veľký (NOVA)

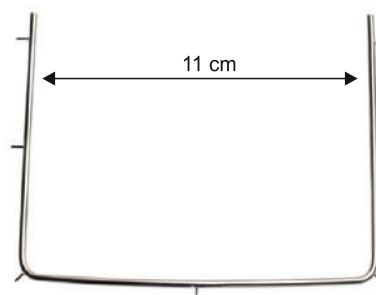

20 €

Obj.kód: N0580



KOFFERDAMOVÉ RÁMČEKY


Kovový rámček Solid stainless (HAGER WERKEN)

Malý 24 €

Obj.kód: 355323

Veľký 24 €

Obj.kód: 355324

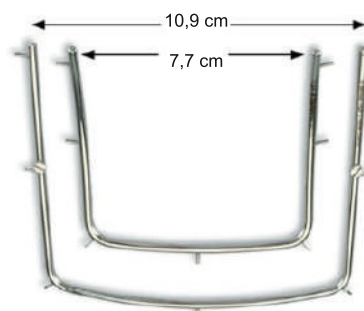

KOFFERDAMOVÉ OBRÚSKY

- Zvyšujú komfort pacienta.
- Zabezpečujú suchú kontaktnú zónu pod kofferdamom.
- Vysoká absorpcia slín, potu a vody.
- Jemné a savé.
- Vhodné pre všetky typy kofferdamových rámečkov.
- Balenie obsahuje 50 ks.

KOFFERDAMOVÉ OBRÚSKY

Kofferdamové obrúsky (KKD)



INFO


Postup: Kofferdam pretiahneme otvorom v obrúsku a napneme ho na rámeček.

18 €

Obj.kód: 07055

Šablóna Dentonet

Umožňuje presné označenie zubov na kofferdamovej blane.

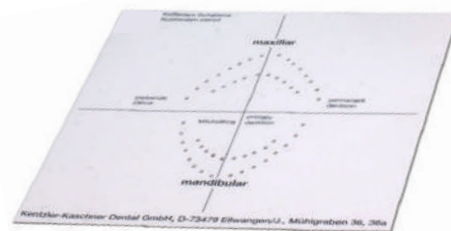


5 €

Obj.kód: sablona

ŠABLÓNY NA KOFFERDAM

Umožňujú presné označenie pozície zubov na kofferdame.

Šablóna (KKD)

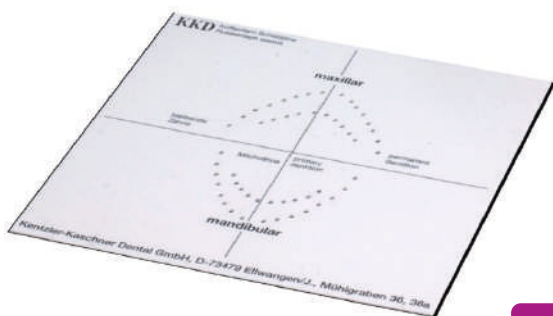

10 €

Obj.kód: 07051

Pečiatka (KKD)




Šablóna vo forme pečiatky na označovanie požadovaných otvorov.

35 €

Obj.kód: 07053

ŠABLÓNY NA KOFFERDAM

Šablóna (HAGER WERKEN)

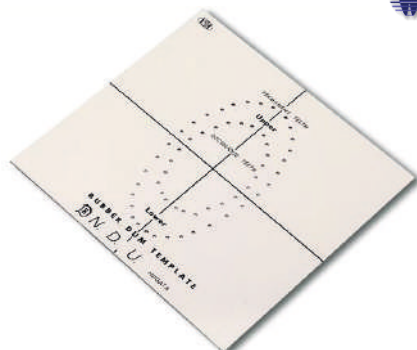

24 €

Obj.kód: 355318

KOFFERDAMOVÉ LUBRIKANTY

Kofferdamový lubrikant (KKD)



Lubrikant na kofferdam 4 tuby á 5g. Pre ľahšie použitie kofferdamu. Možno ľahko odstrániť prúdom vody.



13 €

Obj.kód: 00741

PRÍSLUŠENSTVO

LOPATKY

Slúžia na pretiahnutie kofferdamu a ďalšie úpravy.



Lopatka - Typ Heidemann (KKD)

Tupá.



12 €

Obj.kód: 11968

Nožnice (KKD)

Rovné / zaoblené, 12 cm.



12 €

Obj.kód: 12907

NOŽNICE

Špeciálne nožnice na rozstrihnutie napr. v interdentálnom priestore. Zaoblené hroty, bez rizika poranenia pacienta.

Nožnice rovné (NOVA)

NOVA[★]



17 €

Obj.kód: N0595

Nožnice 45 stupňové (NOVA)



17 €

Obj.kód: N0597

PINZETY

Pinzeta DP-2 (KKD)

Krátka.
Dĺžka: 16 cm.



17 €

Obj.kód: 12182

Pinzeta DP-17 College (KKD)

Dĺžka: 15,5 cm.



13 €

Obj.kód: 12184

Pinzeta (NOVA)

NOVA[★]



13 €

Obj.kód: N0599

DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

WEDJETS

Stabilizačné vlákno pre kofferdam 2,3 m.



24 €

Obj.kód: H06522

KLINKY

Drevené klinky.

Dostupné vo farbách:



Balenie obsahuje 100ks.

14 €

Obj.kód: KH822

Plastové klinky.

Dostupné vo farbách:

biele, tmavomodré, svetlomodré.

Balenie obsahuje 100ks.

41 €



Malé - tmavomodré

Obj.kód: 659780v

Stredné - svetlomodré

Obj.kód: 659790v

Veľké - biele

Obj.kód: 659800v

IF Interdental Floss

Medzizubná niť PFTE Tape so zrkadielkom.

ENAMEL plus HR



5 €

Obj.kód: ECIF1.1

IF Interdental Floss

Medzizubná niť štandard.

ENAMEL plus HR




5 €

Obj.kód: ECIFW

Matrice FLEXI - TRIX

RÖNVIK

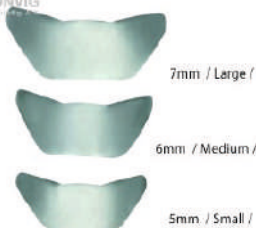

Balenie 50 ks.

30 €

Obj.kód: 25

Organizér pre inštrumentárium



30 €

Obj.kód: 20Z490B

Štartovací set FLEXI-CLAMP™ spony & FLEXI - TRIX™ matrice

Najvýhodnejší spôsob ako začať a vyskúšať nový matricový systém.

Set obsahuje:

- Spony - 50 ks
- Matrice - 150 ks (z každej veľkosti po 50 ks)
- Nasádzacie kliešte



139 €

Obj.kód: 2540

Spony FLEXI-CLAMP™

Nové hygienické spony vyrobené z technického polyméru.

- Efektívna fixácia matrice
 - Jednorazové (zvyšuje sa hygienický štandard a šetrí čas)
 - Šetrné pre pacienta
- Balenie obsahuje 25 kusov.



30 €

Obj.kód: 2500

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Rady pre starostlivosť a údržbu kofferdamových inštrumentov:



Sponové a dierovacie kliešte musia byť pravidelne olejované.



V opačnom prípade začnú hrdzaviieť a budú nefunkčné.



Spony by nemali byť napnuté na podložke.



Spony by nemali dlho zostávať v dezinfekčných prostriedkoch, pretože hrozí nebezpečenstvo vzniku korózie a následné zlomenie spon.



Počas aplikácie spon sa treba vyhnúť prílišnému rozpínaniu spony, pretože by mohlo dôjsť k jej deformácii.



Ohnutie spony do jej pôvodnej podoby nie je vhodné, pretože to napomáha k jej zlomeniu.



Ak sa spony sterilizujú v balení, odporúča sa zaznačiť si číslo spony na vonkajšiu stranu obalu. V opačnom prípade je potom ťažké rozpoznať sponu v balení.

KURZ:
KOFFERDAM
RAZ, DVA, TRI

TEORETICKO - PRAKTICKÝ KURZ

Prednášajúci: **MUDr. Stošek Maxim**
Školiace stredisko: **Nová Polianka, Vysoké Tatry**

- PREČO?** Prečo mám používať kofferdam - pohodlie pri práci, izolácia.
- S ČÍM?** Aké inštrumentárium potrebujem - spony, blany, rámy, kliešte, ...
- KDE?** Pri akom ošetrení ho použiť - adhezívne techniky, endodoncia, subgingiválne rekonštrukcie.
- AKO?** Ako kofferdam nasadiť a fixovať - v prednom a postrannom úseku chrupu.

Cvičiť, cvičiť, cvičiť ...

Každý účastník s pomocou kompletného kofferdamového setu (bude k dispozícii) bojuje s fantómovou hlavou. Účastníci obdržia USB kľúč s prednáškou a praktickými informáciami a tiež kompletný katalóg Kofferdamových produktov s postupom práce, prehľadom sortimentu a radami pre starostlivosť a údržbu kofferdamových inštrumentov. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní pracovať s kofferdamom.



Zábery z kurzov MUDr. Maxima Stoška



Foto: MUDr. Maxim Stošek

O plánovaných termínoch kurzu a cene sa informujte:
0901 771 714 alebo na našom webe:
www.dentonetsro.sk, sekcia VZDELAVANIE.

Objednajte si tovar v stomatologickom internetovom obchode!

pohodlné
RÝCHLE
KOMPLEXNÉ
NAKUPOVANIE



www.dentonetsro.sk



0901 771 730

objednavky@dentonetsro.sk

ZASTÚPENIE PRE BA KRAJ

Ing. Štefan **Migala**
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

ZASTÚPENIE PRE PO A KE KRAJ

Marek **Onderišin**
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

ZASTÚPENIE PRE TT A NR KRAJ

Branislav **Kujan**
kujan@dentonet.sk
+421 901 771 721

ZASTÚPENIE PRE ZA A TN KRAJ

Bc. Iveta **Kučerová**
kucerova@dentonet.sk
+421 901 771 722

NÁJDETE NÁS V MESTÁCH:

Prešov:
DENTONET s.r.o.
Pažica 32
080 06 Prešov

Bratislava:
DENTONET s.r.o.
Kadnárová 25
831 52 Bratislava

Vysoké Tatry:
DENTONET s.r.o.
Nová Polianka 2
059 83 Vysoké Tatry

PREHĽAD SPŇN:

